



Viví un día diferente

La comodidad para cada ocasión.



Reunión Social



Deportes



Negocios



Vacaciones



Eventos



Lentes de contacto de reemplazo diario

Proclear® 1 Day

Ante cualquier duda consulte a su profesional de salud visual.


VISIONTECH
SALUD VISUAL

Comodidad única en su tipo.

Proclear® presenta el único material hidrofílico para lentes de 1 día con una indicación aprobada por la FDA, para ojo seco moderado.

Proclear® puede proporcionar más comodidad para usuarios de lentes de contacto que experimenten molestias leves o síntomas relacionados con resequead durante el uso de lentes.

Las moléculas de fosforilcolina (PC) atraen agua

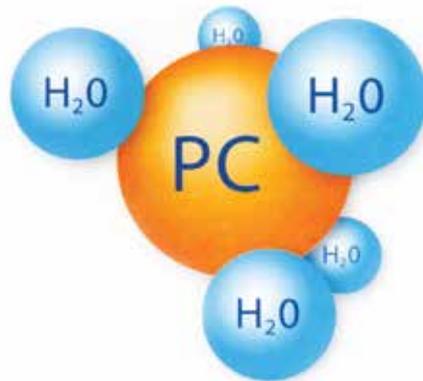

Mantiene el 96% de la hidratación después de 12 horas de uso


Las moléculas de PC se unen a las moléculas de agua en las lágrimas naturales para crear un “escudo” de agua alrededor del lente manteniéndolos limpios y funcionando correctamente.

Biocompatibilidad

La Tecnología PC produce la fosforilcolina que se encuentra en el ojo humano de tal manera que, al igual que los ojos, captan una película de agua protectora.

PC Technology

- Imita sustancias que se encuentran de forma natural en el exterior de todas las células incluidas las células del ojo humano.
- Mantiene una humedad natural para una experiencia fresca e hidratada al usar los lentes.
- No es un aditivo película, ni un tratamiento de superficie. Se encuentra en el núcleo del material del lente y en todo el lente, de tal modo que el beneficio no se pierde ni se disipa con el tiempo.

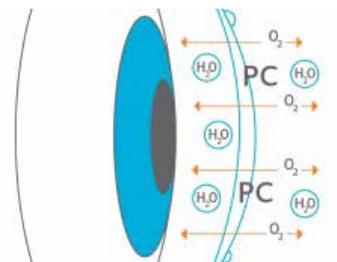

Hidratación de larga duración.

Dinámica de la forma del lente durante la prueba de deshidratación fuera del ojo.

Las lentes Acuvue® Moist, TruEye® y Dailies® muestran cambios considerables en su forma y bordes después de 20 minutos de deshidratación in vitro.

Las lentes Biotrue® y Proclear® no mostraron tales cambios, pero se redujo el diámetro del lente Biotrue después de 20 minutos de deshidratación.



Acuvue® y Dailies® son marcas registradas de J&J y Alcon respectivamente.

Proclear® de 1 día

- Reduce los puntos secos de la lente.
- Resiste depósitos reduciendo el riesgo de irritación del ojo
- Mantiene el flujo de oxígeno.

Óptima nitidez

Las lentes Proclear 1 day tienen un diseño óptico esférico superior que se ajusta específicamente a cada poder. Por eso sin importar cuál sea su prescripción **su visión se optimizará logrando una óptima nitidez de la imagen.**



CooperVision®
Live Brightly.®

Mantenimiento reducido

Experimente **una nueva sensación en lentes, todos los días**, con las lentes Proclear® 1 day. Ya no necesitará comprar soluciones ni recordar cronogramas de limpieza. Ya sea que se dedique a hacer deportes, viaje mucho o simplemente tenga un estilo de vida agitado, nada resultará más simple.

Parámetros

MATERIAL/HIDRATACIÓN	RADIO (mm)	DIÁMETRO (mm)	POTENCIAS
OMAFILCON A/60%	8.7	14.2	DE +8.00D a -12.00D (PASOS DE 0.50 a PARTIR DE +5.00D y -6.00D)

PRODUCCIÓN	USO	Dk/t (-3.00D)	UNIDADES	REEMPLAZO
MOLDEADA	DIARIO	28	30 y 90	DIARIO

Lentes de contacto de reemplazo diario **Proclear® 1 Day**

La comodidad para cada ocasión.



Moreno 1389/91, C1091ABA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Tel/Fax: + 54 11 4382-5012 . visiontech@visiontech.com.ar

www.visiontech.com.ar

 /Visiontech

VISIONTECH
SALUD VISUAL